



Zur chromogenen Bestimmung der Faktor VIII Aktivität in humanem Citratplasma und Faktor VIII Konzentraten


A clear view into the future!

Technochrom FVIII:C

Technochrom FVIII:C ist ein Testkit zur chromogenen Bestimmung der Faktor VIII Konzentration in humanem Plasma, sowie in Plasmakonzentraten.

Geeignet zur Bestimmung der FVIII Konzentration sowie zur Überwachung von FVIII Substitutionstherapien.

TESTPRINZIP

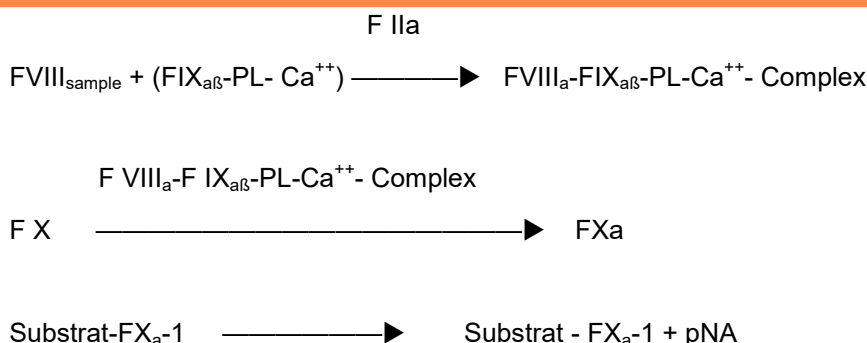

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Manuelle oder automatisierte Abarbeitung auf Gerinnungsautomaten sowie auf ELISA Readern
- Geeignet zum Monitoring von Therapien mit rekombinanten FVIII Konzentraten
- Bestimmung des FVIII INH unter Emicizumab – Therapie
- Einfache Handhabung
- Chargenstabile Kalibration
- Hohe Präzision
- Exzellente Stabilität
- Hoher Linearitätsbereich (0-144 % FVIII Aktivität)
- Heparin insensitiv bis 10 IU/ml

	Intra assay		Inter assay	
Probe	Probe 1	Probe 2	Probe 1	Probe 2
n	12	12	6	6
$\bar{X}$ (%)	98,5	53,4	96,6	54,6
SD (%)	3,96	2,61	2,49	2,29
CV (%)	4,02	4,89	2,58	4,2

Produkt	Packungsinhalt	REF	Testanzahl
Technochrom FVIII:C	2 x 2 ml Substrat 2 x 2 ml Reagenz A 2 x 2 ml Reagenz B 4 x 1 ml Referenz Standards FVIII (1-4) 3 x 30 ml FVIII Verdünnungspuffer 2 x 8 ml FVIII Reaktionspuffer	5344101	2 x 2 ml
Technochrom FVIII:C Ceveron alpha und 100 Serie	2 x 2 ml Substrat 2 x 2 ml Reagenz A 2 x 2 ml Reagenz B 4 x 1 ml Referenz Standards FVIII (1-4) 2 x 20 ml FVIII Verdünnungspuffer	5344103	80 Teste

G022D.002 02/2022

**Technoclone Herstellung von
Diagnostika und Arzneimitteln GmbH**
Brunner Str. 67 | 1230 Wien | Österreich
Tel: +43 1 86 373-0 | Fax: +43 1 86373-44
products@technoclone.com | www.technoclone.com

